

お体に合わせてお選びいただける

# シャワーチェアシリーズ

～ 快適なお風呂タイムを応援します～

## 安全性

- 脚の太さや幅、角度、各部位の材質、取り付けなど、すべての項目で転倒事故の危険性を考え、より安全となるように設計されています。



- 床面をしっかりグリップする脚ゴムは、椅子全体のガタツキを抑えるだけでなく転倒事故の危険性を少なくします。



- パイプはアルミ製、ビス・ワッシャー・ナットはステンレス製ですので、すべての部品が錆びにくくお手入れが簡単です。



- パイプ内に水が残留しないための水抜き穴など、様々な工夫が凝らされています。




## 耐久性

- 肘かけの位置が広いので、体重を自然にかけられます。



広くてゆったり

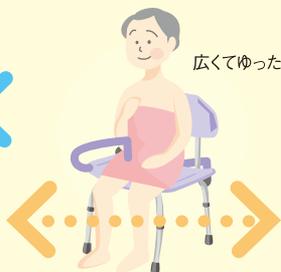

- 背もたれには持ち運びに便利な持ち手がありますので、向きを変えたり移動することがとても楽にできます。



## 快適性

- 座面幅が大きく、全機種に高さ調整機能が付いているので、ゆったりと座れて、背中や体の側面がとても洗いやすいです。

- 折りたたみ・分解ともに、工具を一切使わなくてもできるように設計されているので、どなたでも簡単に安全に作業ができます。



## 簡易性

妥協を許さない4つの基本コンセプト

## 深いU字で局所洗いも楽々！

FY9993 ¥37,400 (税抜 ¥34,000)

高さ調整機能付肘かけ	背ね上げ式肘かけ	固定式肘かけ	折り曲げ可能背もたれ	固定式快速背もたれ	局所楽洗いU字型座面	高さ調整機能付き座面	シートマット	組立済梱包	折り畳み取
------------	----------	--------	------------	-----------	------------	------------	--------	-------	-------



- ① 座面の奥行いっぱいに取り付けられた肘かけは、安全で楽な離着席を応援します。
- ② 体格に合わせて5段階の座面高調整ができるので、とても楽にお座りいただけます。



- ③ 背もたれが簡単に後ろへ倒せるので、背中を洗う時にとても便利です。


## ゆったり座面の安心設計！

FY9991 ¥37,400 (税抜 ¥34,000)

高さ調整機能付肘かけ	背ね上げ式肘かけ	固定式肘かけ	折り曲げ可能背もたれ	固定式快速背もたれ	局所楽洗いU字型座面	高さ調整機能付き座面	シートマット	組立済梱包	折り畳み取
------------	----------	--------	------------	-----------	------------	------------	--------	-------	-------



- ④ 標準装備したシートマットは、椅子の冷たさと硬さを遮断し、快適な座り心地をご提供します。
- ⑤ 脚や背もたれが付いた状態で梱包されていますので、組み立てはどなたでも簡単にできます。

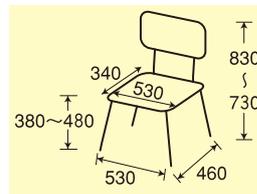

### 仕様

使用時・・・(幅) 530×(奥行) 460×(高さ) 730～830mm  
 たたんだ時・(幅) 530×(奥行) 460×(高さ) 260mm  
 座面・・・(幅) 530×(奥行) 340×(高さ) 380～480mm  
 重量・・・FY9993：4.2kg FY9991：4.5kg  
 材質・・・アルミ・ステンレス・ポリエチレン・ABS樹脂・合成ゴム・EVA

JANコード・・・FY9993：4560184163237 FY9991：4560184163244  
 TAISコード・・・FY9993：00428-000031 FY9991：00428-000030

## お客様の声

発売開始から多数いただいた評価の中から一部をご紹介します。

### 老健施設のスタッフ

不特定多数の入居者が使いますので、既存製品ではどうしても小さくて体を洗ってあげるのに不便でした。御社の商品はゆったりしているのでとても好評です。

### 一般の方

脚がやや外側に傾いているのは安定のためと思いますが、脚ゴムがその傾斜を考えて床にしっかり着くように調整されている、そんな小さなことを見つけて感動しました。

### 販売会社スタッフ

お客様が背もたれの脱着が簡単にできる商品を要望されていて探していました。あまりそのようなタイプはなく、困っている時に御社製品を見つけました。

### 老健施設のスタッフ

取り扱いがどうしても乱暴になってしまい、すぐに壊れたりガタついたりしました。貴社商品は購入して3年少しになりますが、とても頑丈でまだ使っています。

### 理学療法士

当院併設施設の大浴場用に多数購入しました。座幅が狭いと腰掛ける時に肘掛けにお尻を落とし転倒の危険がありましたが、真製品なら安全と思い決めました。

# HS2110と同機能のU字型座面タイプです！

**HS2070 ￥36,300** (税抜 ￥33,000)


高さ調整機能付肘かけ	跳ね上げ式肘かけ	固定式肘かけ	折り曲げ可能背もたれ	固定式快適背もたれ	局所楽洗いU字型座面	高さ調整機能付き座面	シートマット	組立済梱包	折り畳み収納
------------	----------	--------	------------	-----------	------------	------------	--------	-------	--------



- ①この商品の肘かけは、他のタイプに比べて高い位置に取り付けられていますので、特に足腰の弱った方が座る時に体重がかけやすいように設計されています。
- ②背もたれの取り付けバーを肘かけの幅まで広げること、腰の部分が後ろから洗いやすいように設計されています。また背もたれの大きさを体を支えるための最小限の大きさにしているので、少し前傾するだけで背中を洗えます。
- ③体格に合わせて5段階の座面高調整ができるので、とても楽にお座りいただけます。
- ④標準装備したシートマットは、椅子の冷たさと硬さを遮断し、快適な座り心地をご提供します。
- ⑤脚や背もたれが付いた状態で梱包されていますので、組み立てはどなたでも簡単にできます。

■仕様■

使用時・・・(幅)520×(奥行)510×(高さ)730～830mm  
 たたんだ時・・・(幅)520×(奥行)250×(高さ)730～830mm  
 座面・・・(幅)400×(奥行)370×(高さ)400～500mm  
 重量・・・3.9kg  
 材質・・・アルミ・ステンレス・ポリエチレン・ABS樹脂・合成ゴム・EVA  
 JANコード・・・4560184163275  
 TAISコード・・・00428-000032

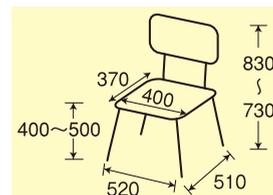

# 高い肘かけ位置で楽な着座を実現！

**HS2110 ￥36,300** (税抜 ￥33,000)


高さ調整機能付肘かけ	跳ね上げ式肘かけ	固定式肘かけ	折り曲げ可能背もたれ	固定式快適背もたれ	局所楽洗いU字型座面	高さ調整機能付き座面	シートマット	組立済梱包	折り畳み収納
------------	----------	--------	------------	-----------	------------	------------	--------	-------	--------



- ①この商品の肘かけは、他のタイプに比べて高い位置に取り付けられていますので、特に足腰の弱った方が座る時に体重がかけやすいように設計されています。
- ②背もたれの取り付けバーを肘かけの幅まで広げること、腰の部分が後ろから洗いやすいように設計されています。また背もたれの大きさを体を支えるための最小限の大きさにしているので、少し前傾するだけで背中を洗えます。
- ③体格に合わせて5段階の座面高調整ができるので、とても楽にお座りいただけます。
- ④標準装備したシートマットは、椅子の冷たさと硬さを遮断し、快適な座り心地をご提供します。
- ⑤脚や背もたれが付いた状態で梱包されていますので、組み立てはどなたでも簡単にできます。

■仕様■

使用時・・・(幅)530×(奥行)460×(高さ)740～840mm  
 たたんだ時・・・(幅)530×(奥行)230×(高さ)740～840mm  
 座面・・・(幅)410×(奥行)330×(高さ)390～490mm  
 重量・・・3.7kg  
 材質・・・アルミ・ステンレス・ポリエチレン・ABS樹脂・合成ゴム・EVA  
 JANコード・・・4560184163183  
 TAISコード・・・00428-000029

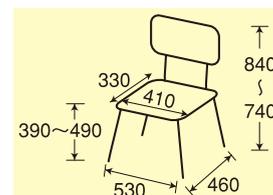

ISO世界規格に適合した安全性と耐久性が魅力

歩行器シリーズ

<p><b>折りたたみ式歩行器</b></p> <p>国内20年以上の販売実績がある人気シリーズ</p>  <p>C2021(C/S/SS)</p>	<p><b>折りたたみ式・キャスター付歩行器</b></p> <p>3種類のキャスターをさらに楽にする</p>  <p>R/MR/LR</p> <p>Rタイプ MRタイプ LRタイプ</p>	
<p><b>折りたたみ式・立ち上がり歩行器</b></p> <p>椅子やトイレからの立ち上がり、二段式グリップがしっかりと応援</p>  <p>C2021W(CW)</p>	<p><b>折りたたみ式・交互歩行器</b></p> <p>歩幅に合わせた左右のフレームを交互に移動</p>  <p>C2023(C)</p> <p>①右足を前に進めます ②右手を前に進めます ③右足を前に進めます ④右足を前に進めます ⑤左手を前に進めます</p>	
<p><b>強い</b></p> <p>安全のために</p>  <p>強度と耐久性の高い高品質アルミを使用。特に負荷のかかる脚連結部は、二重パイプ構造でより耐久性を高めています。</p>	<p><b>優しい</b></p> <p>滑らず柔らかい特殊ラバー</p>  <p>グリップに採用した特殊ラバーは耐久性に優れ、洗浄・消毒がしやすく、病院・施設・レンタルに最適です。</p>	<p><b>便利</b></p> <p>ボタン一つで簡単折りたたみ</p>  <p>折りたたんだあとは、幅約10cmの狭いスペースに納まります。</p>

自分が決める、長さも歩みも

神戸すてき

杖の長さ、ずっと同じになっていませんか？  
場面に応じた長さ調整をして、健やかな歩行ライフを！



長さ調整ボタン

買い物カート使用時


椅子からの立ち上がり時

花柄ホワイ ト 木目 チェックシルバー

長さ 67~103cm

現場の要望を形にしました

特浴用アクションパッド

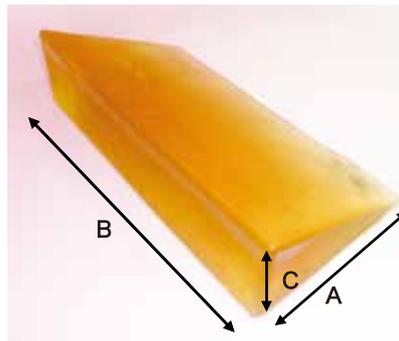

特浴用ポジショナー

体の両サイドから仰臥位を保持したり、背中を洗う時にお腹側に使用します。

大サイズ(カバー付) 品番 #40690  
サイズ: 20(A)×40(B)×10(C)cm  
重量: 4.7Kg

小サイズ(カバー付) 品番 #40691  
サイズ: 20(A)×20(B)×10(C)cm  
重量: 2.4Kg

※実際のご使用例



特浴用平状パッド

背中を洗うため、側臥位をとった時に、腰骨の痛みを軽減させます。

平状(カバーなし) 品番 #40692

サイズ: 45(縦)×30(横)×1.3(高)cm  
重量: 1.9Kg



弊社は、乗馬用具の専門商社として国内最大手、世界でも五指に入る貿易会社から国内事業部が独立して設立されました。貿易会社として培った能力と世界10カ国以上に及ぶビジネス・ネットワークを活かし、福祉分野で日本より10年以上先行すると言われる欧米各国を中心に情報交換を行っています。①確かな販売実績がある ②サポート体制が整っている ③日本になかったか、或いは品質や特長などで従来品を大きく上回る ④現場で強い要望がある ⑤愛がこもっている、それらすべてを満たした素晴らしい商品だけを厳選して日本の皆様にお届けします。これからもこの基本姿勢を変えることなく、国内約150社のビジネスパートナーと連携し、「より快適でより安全な生活のご提供」のためにアクション(考動)を起こしていきます。

企画開発・輸入発売元

アクションジャパン株式会社

〒658-0046神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL:078-843-5417 FAX:078-843-6817

アクションジャパン

検索



商品に関するお問い合わせは、弊社ホームページまで→

●商品についてのお問い合わせやデモ品のご要望は